

Slovenská: Chladivý hrejivý kompresný obklad

Hinweis: Kliknite tukaj za navodila za uporabo v obliki datoteke pdf.

Inhaltsverzeichnis

1 Návod na použitie studený/teplý obklad	1
1.1 Oblasti použitia	1
1.1.1 Aplikácia za studena:	1
1.1.2 Teplá aplikácia:	2
1.2 Poznámky k aplikácii	2
1.3 Bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
1.4 Čistenie:	3
1.5 Likvidácia	3
1.6 Nahlasovanie incidentov	3
1.6.1 Osobitné pokyny:	3
1.6.2 Výrobca:	5
1.6.3 Príloha:	5

Návod na použitie studený/teplý obklad

Studený/teplý obklad je zdravotnícka pomôcka určená na vonkajšie použitie. Aplikuje sa na neporušenú pokožku. Používa sa na zmiernenie a liečbu bolesti na klinikách, v ordináciách, v domácnosti a pri voľnočasových aktivitách. Ide o opakovane použiteľný gélový obklad, na použitie pri studenej a tepelnej terapii.

Oblasti použitia

Aplikácia za studena:

Vložte obklad do chladničky alebo do mrazničky na cca 2 hodiny.

Aplikácia chladu lokálne tlmí bolesť a má dekongestantný účinok. Dá sa aplikovať na

- akútny zápal kĺbov a svalov
- tupé poranenia
- modriny
- uštipnutie hmyzom
- bolesť zubov
- pomliaždeniny

- opuchy
- výrony
- bolesť hlavy
- krvácanie z nosa
- ľahké popáleniny

Teplá aplikácia:

Zohrievanie obkladu v mikrovlnnej rúre alebo vo vodnom kúpeli je možné vykonať podľa nasledujúcich pokynov:

Obklad	Mikrovlnná rúra 600 W	Vodný kúpeľ 80 °C
30 × 40	4 minúty	4 minúty
21 × 38	3 minúty	4 minúty
16 × 26	4 minúty	4 minúty
12 × 29	2 minúty	4 minúty
7,5 × 35	2 minúty	4 minúty
13 × 14	55 sekúnd	2 minúty
7,5 × 13	25 sekúnd	2 minúty
7,5 × 52	1 minúty	1 minúty

Teplá aplikácia lokálne stimuluje krvný obeh a uvoľňuje napätie. Dá sa aplikovať na:

- svalový kŕč
- bolesť chrbta
- menštruačné bolesti

Poznámky k aplikácii

Nikdy neaplikujte obklad priamo na pokožku. Medzi obklad a pokožku vždy vložte látku.

Nepoužívajte dlhšie ako 20 minút, medzi aplikáciami si urobte prestávku 30 minút!

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Studený/teplý obklad je určený len na vonkajšie použitie.

Pri ochoreniach srdca, krvného obehu a cukrovky je potrebná konzultácia s lekárom.

Používať len pod dozorom a uchovávať mimo dosahu u detí, ľudí vyžadujúcich pomoc.

Nevyvíjajte žiadny tlak na obklad a nikdy ho nepoužívajte, ak má poškodený obal alebo vyteká.

U detí a osôb s poruchou kognitívnych funkcií používajte len pod dohľadom a uchováajte mimo dosahu!

Po použití vypláchnite ústa vodou a poraďte sa s lekárom.

Čistenie:

Obklad umývajte ručne jemným mydlom. Na čistenie nepoužívajte dezinfekčné prostriedky ani iné rozpúšťadlá.

Likvidácia

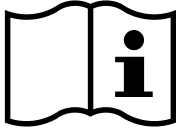
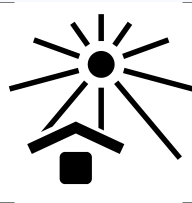
Obklad je možné likvidovať s komunálnym odpadom.

Nahlasovanie incidentov

Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti so studeným/teplým obkladom, by ste mali nahlásiť výrobcovi (e-mail: qm@cundv.de), ako aj príslušnému orgánu.

Osobitné pokyny:

	Číslo výrobnej šarže
	Dátum výroby
	Výrobca
	Medicínsky produkt
	Ohrev v mikrovlnnej rúre - pri zodpovedajúcej veľkosti dodržujte "Špecifikáciu časov ohrevu".

	Pri poškodenom obale prestaňte obklad používať
	Dodržiavajte návod na použitie Prosím dodržujte!
	Pozor
	Zneškodňovanie spolu s komunálnym odpadom
	Zmluvný predajca
	Číslo artiklu
	Nepoužívať u detí mladších ako 3 roky
	Chráňte pred slnečným žiarením

Výrobca:

C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

D-33775 Versmold

Príloha:

[SK Návod na používanie chladivého-hrejivého gélového kompresného obkladu](#)