

Deutsch:Kalt-Warm-Kompressen

Ausgabe: 19.04.2025

Letzte Änderung: 19.06.2024

Seite von

Deutsch:Kalt-Warm-Kompressen

Hinweis: [Klicken Sie hier für die Gebrauchsanweisung als pdf-Datei](#)

Inhaltsverzeichnis

- [1 Gebrauchsanweisung](#)
 - [1.1 Anwendungsbereiche](#)
 - [1.1.1 Kaltanwendung:](#)
 - [1.1.2 Warmanwendung:](#)
 - [1.2 Anwendungshinweise](#)
 - [1.3 Sicherheits- und Warnhinweise](#)
 - [1.4 Reinigung:](#)
 - [1.5 Entsorgung](#)
 - [1.6 Meldung von Vorkommnissen](#)
 - [1.6.1 Besondere Hinweise:](#)
 - [1.6.2 Hersteller:](#)

Gebrauchsanweisung

Die Kalt-Warm-Kompresse ist ein Medizinprodukt für die äußerliche Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen in Kliniken, Praxen, Haushalt & Freizeit. Es handelt sich um eine wiederverwendbare Gel-Kompresse, zum Einsatz in der Kälte- und Wärmetherapie.

Anwendungsbereiche

Kaltanwendung:

Die Kompresse für ca. 2 Std. ins Gefrierfach bzw. in die Tiefkühltruhe legen.

Die Kaltanwendung ist lokal schmerzlindernd und wirkt abschwellend. Sie kann angewendet werden bei:

- stumpfe Verletzungen
- Prellungen
- Schwellungen
- Verstauchungen
- Blutergüssen
- Kopfschmerzen
- Zahnschmerzen
- Nasenbluten
- Insektenstichen
- akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln
- leichte Verbrennungen

Warmanwendung:

Das Erwärmen der Kompresse in der Mikrowelle oder in warmen Wassern kann gemäß den folgenden Vorgaben erfolgen:

Kompresse	Mikrowelle bei 600W	Wasserbad 80°C
30x40	4:00 Minuten	4:00 Minuten
21x38	3:00 Minuten	4:00 Minuten
16x26	4:00 Minuten	4:00 Minuten
12x29	2:00 Minuten	4:00 Minuten
7,5x35	2:00 Minuten	4:00 Minuten
13x14	0:55 Minuten	2:00 Minuten
7,5x13	0:25 Minuten	2:00 Minuten
7,5x52	1:00 Minuten	1:00 Minuten

Die Warmanwendung ist lokal durchblutungsfördernd und wirkt spannungslösend. Sie kann angewendet werden bei:

- Muskelkater
- Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden

Anwendungshinweise

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Keine Anwendung länger als 20 Minuten, zwischen den Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten!

Sicherheits- und Warnhinweise

Die Kalt-Warm-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht anwenden bei: Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden!

Bitte keinen Druck ausüben und eine beschädigte Kompressse, z.B. Auslaufen, keinesfalls mehr verwenden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beuteinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren

Reinigung:

Handwäsche vor der Anwendung mit milder Seife. Keine Desinfektionsmittel oder andere Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.

Entsorgung

Die Kompressse kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Kalt-WarmKompressse auftritt, dem Hersteller (E-Mail: qm@cunv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Besondere Hinweise:

	Chargencode
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Medizinprodukt
	Anwendung in der Mikrowelle erlaubt

CH REP

Schweizer Bevollmächtigter



Nicht verwenden, wenn der Artikel beschädigt ist



Gebrauchsanweisung beachten



Achtung



Entsorgung im Hausmüll




Vertriebspartner

REF

Artikelnummer



Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden

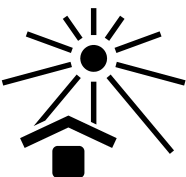

Vor Sonneneinstrahlung schützen



Importeur

Hersteller:

C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold