C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse

Hauptseite

Inhaltsverzeichnis							
1 Produktbeschreibung							
2 Anwendungsanweisungen	L						
2.1 Kaltanwendung	L						
2.2 Warmanwendung 1	L						
3 Sicherheits- und Warnhinweise							
4 Reinigung	2						
4.1 Zusammensetzung	2						
4.2 Meldung von Vorkommnissen	2						
5 Produktgrößen	2						
6 Gebrauchsanweisung4	4						
6.1 Download weitere Sprachen4	1						
7 Sicherheitsdatenblatt	1						
8 Konformitätserklärung 5	5						

Produktbeschreibung

Die Kalt/Warm Kompresse ist ein wiederverwendbares Medizinprodukt zur Linderung und Behandlung von Schmerzen. Sie wird in der Kälte- und Wärmetherapie eingesetzt und ist für den Gebrauch in Kliniken, Praxen, Haushalten und in der Freizeit geeignet.

Anwendungsanweisungen

Kaltanwendung

Die Kompresse sollte etwa zwei Stunden im Gefrierfach oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden. Sie wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend und ist geeignet für akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln, stumpfe Verletzungen, Blutergüsse, Insektenstiche, Zahnschmerzen, Prellungen, Schwellungen, Verstauchungen, Kopfschmerzen, Nasenbluten und leichte Verbrennungen.

Warmanwendung

Die Kompresse sollte etwa vier Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser gelegt werden. Sie wirkt lokal durchblutungsfördernd und spannungslösend und ist geeignet für Muskelkater, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Ausgabe: 01.11.2025 Letzte Änderung: 03.06.2025



Sicherheits- und Warnhinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung bei intakter Haut.

Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 20 Minuten, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Nicht bei Kindern, hilflosen oder empfindungsgestörten Personen anwenden und unzugänglich aufbewahren.

Keine beschädigte Kompresse verwenden. Bei Auslaufen oder Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Reinigung

Die Kompresse sollte vor der Anwendung per Hand mit milder Seife gewaschen werden. Keine Desinfektionsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Zusammensetzung

Wässriges Gel (Wasser, Proplylenglykol, Polyacrylsäure, UV-Stabilisator, Konservierungsmittel, Zitronensäure, Ntriumhoydroxid und ggf. Farbstoffe)

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

Meldung von Vorkommnissen


Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktgrößen

 7.5×13

7,5 x 35

7,5 x 52

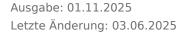







13 x 14

12 x 29

16 x 26







21 x 38

30 x 40





Ausgabe: 01.11.2025 Letzte Änderung: 03.06.2025



Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung Kalt-Warm Kompresse

Die Kalt-Warm-Kompresse ist ein Medizinprodukt für die äußerliche Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen in Kliniken, Praxen, Haushalt & Freizeit. Es handelt sich um eine wiederverwendbare Gel-Kompresse, zum Einsatz in der Kälte- und Wärmetherapie.

Anwendungsbereiche

Kaltanwendung:

Die Kompresse für ca. 2 Std. ins Gefrierfach bzw. in die Tiefkühltruhe legen.

Die Kaltanwendung ist lokal schmerzlindernd und wirkt abschwellend. Sie kann angewendet werden hei:

 Zahnschmerzen Nasenbluten Insektenstichen

leichte Verbrennungen

akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln

- stumpfe Verletzungen
- Verstauchungen

Das Erwärmen der Kompresse in der Mikrowelle oder in warmen Wassern kann gemäß den folgenden Vorgaben erfolgen:

Kompresse	Mikrowelle bei 600W	Wasserbad 80°C	Kompresse	Mikrowelle bei 600W	Wasserbad 80°C
30 x 40	4:00 Minuten	4:00 Minuten	7,5 x 35	2:00 Minuten	4:00 Minuten
21 x 38	3:00 Minuten	4:00 Minuten	13 x 14	0:55 Minuten	2:00 Minuten
16 x 26	4:00 Minuten	4:00 Minuten	7,5 x 13	0:25 Minuten	2:00 Minuten
12 x 29	2:00 Minuten	4:00 Minuten	7,5 x 52	1:00 Minute	1:00 Minute

Die Warmanwendung ist lokal durchblutungsfördernd und wirkt spannungslösend. Sie kann angewendet werden bei:

- Muskelkater
 Rückenschmerzen
 Menstruationsbeschwerden

Anwendungshinweise

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Keine Anwendung länger als 20 Minuten, zwischen den Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten!

Sicherheits- und Warnhinweise
Die Kalt-Warm-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht anwenden bei: Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden!

Bitte keinen Druck ausüben und eine beschädigte Kompresse, z.B. Auslaufen, keinesfalls mehr

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich

Rei versehentlichem Verschlucken des Reuteinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren

Handwäsche vor der Anwendung mit milder Seife. Keine Desinfektionsmittel oder andere Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.

Die Kompresse kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Kalt-Warm-Kompresse auftritt, dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Besondere Hinweise





C+V Pharma Depot GmbH Bockhorster Landweg 15 33775 Versmold Fon: +49 (5424) 21 64 40 Fax: +49 (5424) 21 64 34 Mail: info@cundv.de www.cundv.de

Stand der Informationen: 18.05.2023

Download Gebrauchsanweisung Kalt-Warm-Kompresse

Download weitere Sprachen

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Polski

Slovenská

Suomi

Sicherheitsdatenblatt

Download Sicherheitsdatenblatt Kalt-Warm-Kompresse

Ausgabe: 01.11.2025 Letzte Änderung: 03.06.2025



Konformitätserklärung

Download Konformitätserklärung Kalt-Warm-Kompersse



