

Inhaltsverzeichnis


1. Datei:TD KWK Konformitaetserkl 2024-11-21 gesamt.pdf	10
2. Benutzer:Njanzen	4
3. C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse	5

Datei:TD KWK Konformitaetserkl 2024-11-21 gesamt.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



[Gehe zu Seite OK](#)

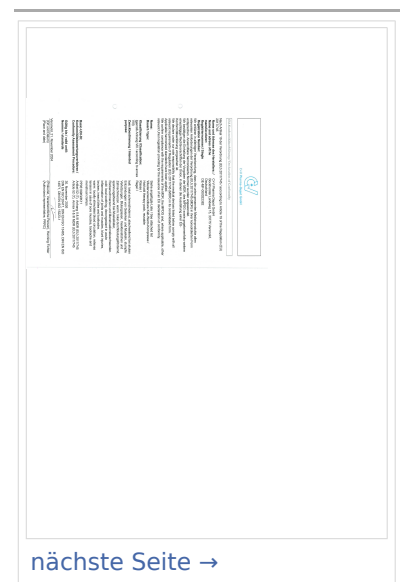

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: [424 × 600 Pixel](#). Weitere
Auflösung: [170 × 240 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (1.240 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 849 KB, MIME-Typ: application/pdf, 2 Seiten)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubi Id	Maße	Benutzer	Komme ntar
aktu ell	19:01, 31. Mai 2025		1.240 × 1.754, 2 Seiten (849 KB)	Njanzen (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Software RICOH IM C3000

Umwandlungsprogramm RICOH IM C3.000

Verschlüsselt no

Papierformat

- 841,92 x 595,2 pts (A4)
- 595,32 x 841,92 pts (A4)

Version des PDF-Formats 1,6

Benutzer:Njanzen

Vorlage:User

C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse

Hauptseite

Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung	5
2 Anwendungsanweisungen	5
2.1 Kaltanwendung	5
2.2 Warmanwendung	5
3 Sicherheits- und Warnhinweise	6
4 Reinigung	6
4.1 Zusammensetzung	6
4.2 Meldung von Vorkommnissen	6
5 Produktgrößen	6
6 Gebrauchsanweisung	8
6.1 Download weitere Sprachen	8
7 Sicherheitsdatenblatt	8
8 Konformitätserklärung	9

Produktbeschreibung

Die Kalt/Warm Kompresse ist ein wiederverwendbares Medizinprodukt zur Linderung und Behandlung von Schmerzen. Sie wird in der Kälte- und Wärmetherapie eingesetzt und ist für den Gebrauch in Kliniken, Praxen, Haushalten und in der Freizeit geeignet.

Anwendungsanweisungen

Kaltanwendung

Die Kompresse sollte etwa zwei Stunden im Gefrierfach oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden. Sie wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend und ist geeignet für akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln, stumpfe Verletzungen, Blutergüsse, Insektenstiche, Zahnschmerzen, Prellungen, Schwellungen, Verstauchungen, Kopfschmerzen, Nasenbluten und leichte Verbrennungen.

Warmanwendung

Die Kompresse sollte etwa vier Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser gelegt werden. Sie wirkt lokal durchblutungsfördernd und spannungslösend und ist geeignet für Muskelkater, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Sicherheits- und Warnhinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung bei intakter Haut.

Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 20 Minuten, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Nicht bei Kindern, hilflosen oder empfindungsgestörten Personen anwenden und unzugänglich aufbewahren.

Keine beschädigte Kompresse verwenden. Bei Auslaufen oder Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Reinigung

Die Kompresse sollte vor der Anwendung per Hand mit milder Seife gewaschen werden. Keine Desinfektionsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Zusammensetzung

Wässriges Gel (Wasser, Propylenglykol, Polyacrylsäure, UV-Stabilisator, Konservierungsmittel, Zitronensäure, Natriumhydroxid und ggf. Farbstoffe)

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

Meldung von Vorkommnissen


Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktgrößen

7,5 x 13

7,5 x 35


7,5 x 52

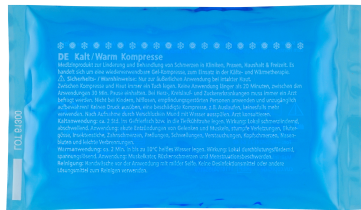

13 x 14


12 x 29

16 x 26

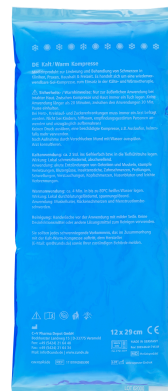

21 x 38

30 x 40

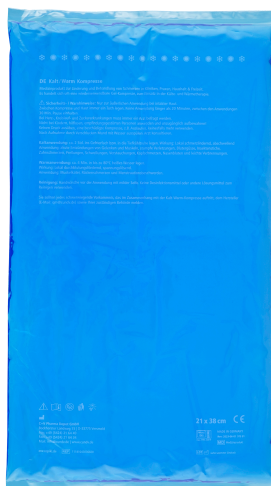

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung Kalt-Warm Komresse

Die Kalt-Warm-Komresse ist ein Medizinprodukt für die äußerliche Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen in Kliniken, Praxen, Haushalt & Freizeit. Es handelt sich um eine wiederverwendbare Gel-Komresse, zum Einsatz in der Kälte- und Wärmertherapie.

Anwendungsbereiche

Kaltanwendung:

Die Komresse für ca. 2 Std. ins Gefrierfach bzw. in die Tiefkühltruhe legen.

Die Kaltanwendung ist lokal schmerzlindernd und wirkt abschwellend. Sie kann angewendet werden bei:

- stumpfe Verletzungen
- Prellungen
- Schwellungen
- Verstauchungen
- Blutergüssen
- Kopfschmerzen
- Zahnschmerzen
- Nasenbluten
- Insektenstichen
- akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln
- leichte Verbrennungen

Warmanwendung:

Das Erwärmen der Komresse in der Mikrowelle oder in warmen Wasser kann gemäß den folgenden Vorgaben erfolgen:

Komresse	Mikrowelle bei 600W	Wasserbad 80°C	Komresse	Mikrowelle bei 600W	Wasserbad 80°C
30 x 40	4:00 Minuten	4:00 Minuten	7,5 x 35	2:00 Minuten	4:00 Minuten
21 x 38	3:00 Minuten	4:00 Minuten	13 x 14	0:55 Minuten	2:00 Minuten
16 x 26	4:00 Minuten	4:00 Minuten	7,5 x 13	0:25 Minuten	2:00 Minuten
12 x 29	2:00 Minuten	4:00 Minuten	7,5 x 52	1:00 Minute	1:00 Minute

Die Warmanwendung ist lokal durchblutungsfördernd und wirkt spannungslösend. Sie kann angewendet werden bei:

- Muskelkater
- Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden

Anwendungshinweise

Legen Sie die Komresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Komresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 20 Minuten, zwischen den Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten!

Sicherheits- und Warnhinweise

Die Kalt-Warm-Komresse ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht anwenden bei: Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden!

Bitte keinen Druck ausüben und eine beschädigte Komresse, z.B. Auslaufen, keinesfalls mehr verwenden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beuteinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren.

Reinigung:

Handwäsche vor der Anwendung mit milder Seife. Keine Desinfektionsmittel oder andere Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.

Entsorgung

Die Komresse kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Kalt-Warm-Komresse auftritt, dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Besondere Hinweise

	Medizinprodukt		Schweizer Repräsentant
	Hersteller		Importeur
	Herstellungsdatum		Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Vertriebspartner		Bei Beschädigter Verpackung nicht mehr verwenden
	Fertigungslosnummer		Tidymen
	Artikelnummer		Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Gebrauchsanweisung beachten Bitte aufbewahren!		Erwärmen in der Mikrowelle
	Achtung		


C+V Pharma Depot GmbH
Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold
Fon: +49 (5424) 21 64 40
Fax: +49 (5424) 21 64 34
Mail: info@cundv.de
www.cundv.de


Stand der Informationen: 18.05.2023

[Download Gebrauchsanweisung Kalt-Warm-Komresse](#)

[Download weitere Sprachen](#)

[English](#)

[Español](#)

[Français](#)

[Italiano](#)

[Nederlands](#)

[Polski](#)

[Slovenská](#)

[Suomi](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Download Sicherheitsdatenblatt Kalt-Warm-Komresse](#)

Konformitätserklärung


[Download Konformitätserklärung Kalt-Warm-Kompresse](#)

Datei:TD KWK Konformitaetserkl 2024-11-21 gesamt.pdf

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



[Gehe zu Seite OK](#)

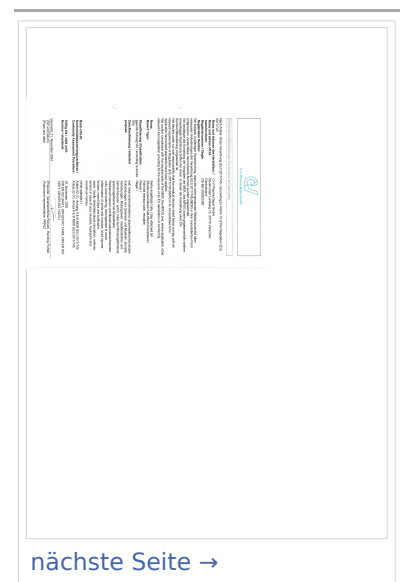

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: [424 × 600 Pixel](#). Weitere
Auflösung: [170 × 240 Pixel](#).

[Originaldatei](#) (1.240 × 1.754 Pixel, Dateigröße: 849 KB, MIME-Typ: application/pdf, 2 Seiten)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubi Id	Maße	Benutzer	Komme ntar
aktu ell	19:01, 31. Mai 2025		1.240 × 1.754, 2 Seiten (849 KB)	Njanzen (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Software RICOH IM C3000

Umwandlungsprogramm RICOH IM C3.000

Verschlüsselt no

Papierformat

- 841,92 x 595,2 pts (A4)
- 595,32 x 841,92 pts (A4)

Version des PDF-Formats 1,6