



# Inhaltsverzeichnis

---

--



# Deutsch:Kalt-Warm-Kompressen

**Hinweis:** Klicken Sie hier für die Gebrauchsanweisung als pdf-Datei

## Inhaltsverzeichnis

1 Gebrauchsanweisung .....	2
1.1 Anwendungsbereiche .....	2
1.1.1 Kaltanwendung: .....	2
1.1.2 Warmanwendung: .....	3
1.2 Anwendungshinweise .....	3
1.3 Sicherheits- und Warnhinweise .....	4
1.4 Reinigung: .....	4
1.5 Entsorgung .....	4
1.6 Meldung von Vorkommnissen .....	4
1.6.1 Besondere Hinweise: .....	4
1.6.2 Hersteller: .....	6

## Gebrauchsanweisung

Die Kalt-Warm-Kompresse ist ein Medizinprodukt für die äußerliche Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen in Kliniken, Praxen, Haushalt & Freizeit. Es handelt sich um eine wiederverwendbare Gel-Kompresse, zum Einsatz in der Kälte- und Wärmetherapie.

## Anwendungsbereiche

### Kaltanwendung:

Die Kompresse für ca. 2 Std. ins Gefrierfach bzw. in die Tiefkühltruhe legen.

Die Kaltanwendung ist lokal schmerzlindernd und wirkt abschwellend. Sie kann angewendet werden bei:

- stumpfe Verletzungen
- Prellungen
- Schwellungen



- Verstauchungen
- Blutergüssen
- Kopfschmerzen
- Zahnschmerzen
- Nasenbluten
- Insektenstichen
- akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln
- leichte Verbrennungen

## Warmanwendung:

Das Erwärmen der Kompresse in der Mikrowelle oder in warmen Wassern kann gemäß den folgenden Vorgaben erfolgen:

Kompresse	Mikrowelle bei 600W	Wasserbad 80°C
30x40	4:00 Minuten	4:00 Minuten
21x38	3:00 Minuten	4:00 Minuten
16x26	4:00 Minuten	4:00 Minuten
12x29	2:00 Minuten	4:00 Minuten
7,5x35	2:00 Minuten	4:00 Minuten
13x14	0:55 Minuten	2:00 Minuten
7,5x13	0:25 Minuten	2:00 Minuten
7,5x52	1:00 Minuten	1:00 Minuten

Die Warmanwendung ist lokal durchblutungsfördernd und wirkt spannungslösend. Sie kann angewendet werden bei:

- Muskelkater
- Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden

## Anwendungshinweise

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Keine Anwendung länger als 20 Minuten, zwischen den Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten!

## Sicherheits- und Warnhinweise

---

Die Kalt-Warm-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht anwenden bei: Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden!

Bitte keinen Druck ausüben und eine beschädigte Kompresse, z.B. Auslaufen, keinesfalls mehr verwenden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beuteinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren

## Reinigung:

---

Handwäsche vor der Anwendung mit milder Seife. Keine Desinfektionsmittel oder andere Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.

## Entsorgung

---

Die Kompresse kann über den Hausmüll entsorgt werden.

## Meldung von Vorkommnissen

---








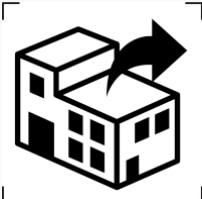
Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Kalt-Warm-Kompresse auftritt, dem Hersteller (E-Mail: [qm@cunv.de](mailto:qm@cunv.de)) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

## Besondere Hinweise:

---

	Chargencode
	Herstellungsdatum



	Hersteller
	Medizinprodukt
	Anwendung in der Mikrowelle erlaubt
	Schweizer Bevollmächtigter
	Nicht verwenden, wenn der Artikel beschädigt ist
	Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung
	Entsorgung im Hausmüll
	Vertriebspartner



	Artikelnummer
	Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Importeur

**Hersteller:**

C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold