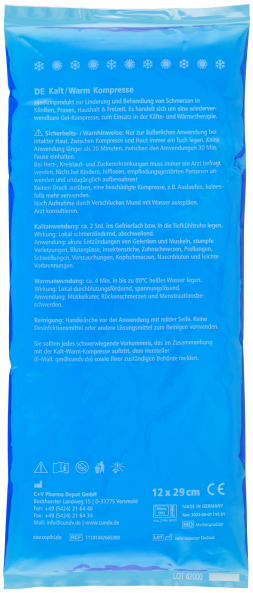
C+V Pharma


CV-SONIC
Beschreibung: Das Kontaktgel ist ein unterei
nicht-färbendes Gel, das ausschließlich für di
bestimmt ist und mit handelsüblichen Ultrasch
werden kann.
Anwendungsbereiche: Das Kontaktmittel für di
und -diagnostik kann auf intaktter, unbeschädigt
werden, um einen möglichst verlustfreien Übergi
zum Körper zu erreichen. Das Kontaktgel ist für
medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Aufgru
Erkenntnisse gibt es keinen Ausschluss von Nebe
Anwendung: Die benötigte Menge Gel auf den
untersuchenden Körperregion und/oder auf die Ul
len. Durchführung der Ultraschalluntersuchung
des Entfernen des Gels von der Ultraschallsonde
Körperregion mit einem weichen Tuch.
Nach Anbruch 6 Monate haltbar.
Kontraindikation
Das Gel ist ausschließlich für die äußerliche Anw
sollte bei folgenden Anwendungen nicht verwen
- Invasive Verfahren, bei denen eine Vorrichtung
eingeführt wird.
- Jegliche Verfahren auf oder in der Nähe von
Ingredients: Aqua, Glycerin, Carbomer, Sodium Hydro
Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylis
Nur zur äußerlichen Anwendung
Mit Feuchthalter
Vor Sonnenlicht schützen
MD Medizinprodukt
Made in Germany


CV-TRONIC
Beschreibung: Das Elektrodengel ist ein unterei
und nicht-färbendes Gel, das ausschließlich für di
dung zur Verwendung mit EKG-, EEG- und Reiz
in elektromedizinischen Verfahren (ausgenomm
empfohlen wird.
Anwendungsbereiche: Das Elektrodengel kann
unbeschädigter Haut verwendet werden. Die Ver
Anwendung durch medizinisches Fachpersonal
der vorliegenden Erkenntnisse gibt es keine Aus
Patientengruppen.
Anwendung: Die benötigte Menge Gel entnehm
Hautoberfläche der zu untersuchenden Körperre
Elektrode(n) verteilen. Anbringen der Elektrode(n
vom Patienten bzw. Entfernen der Elektrode(n)
Tuch.
Nach Anbruch 6 Monate haltbar.
Kontraindikation
Das Gel ist ausschließlich für die äußerliche Anw
sollte bei folgenden Anwendungen nicht verwen
- Nicht bei Defibrillationsverfahren anwenden.
- Jegliche Verfahren auf oder in der Nähe von
Ingredients: Aqua, Glycerin, Carbomer, Sodium Chlo
Sodium Hydroxide, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol
Methylisothiazolinone, UV-Stabilisator, CI74 Acid
Nur zur äußerlichen Anwendung
Mit Feuchthalter
Vor Sonnenlicht schützen
MD Medizinprodukt
Made in Germany


DE Kalt/Warm Kompresse
12 x 29 cm
CE


Kälte-Sofort
KOMPRESSE
INSTANT KÄLTE - SOFORT KOMPRESSE
INSTANT COLD COMPRESS - READY FOR USE
INSTANT KOUDEKOMPRES - GEBRUIKSKLAAR
15 x 25 cm
CE 0483